

Inskam H100, Mitesserentferner



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.


BEACHTEN

1. Denken Sie daran, vor der Anwendung eine heiße Kompresse mit einem Gesichtsdampfer oder einem heißen Handtuch auf Ihr Gesicht aufzulegen, um die Poren zu öffnen und Mitesser und Öl aufzuweichen. Anschließend können die Mitesser leicht abgesaugt werden.
2. Benutzer mit empfindlicher Haut wählen bitte zunächst eine niedrigere Stufe und erhöhen die Stufe dann schrittweise entsprechend dem Hautzustand.
3. Drücken Sie den Produktaufsatz nicht auf die Gesichtshaut, um Hautverletzungen zu vermeiden.
4. Lassen Sie es nicht zu lange einwirken, vorzugsweise nicht länger als 2 Sekunden, da es sonst zu Hautverfärbungen oder -schäden kommen kann.
5. Es wird empfohlen, es 1–2 Mal pro Woche zu verwenden, jedes Mal nicht länger als 5 Minuten, nicht für wiederholte und langfristige Verwendung geeignet.
6. Nach der Verwendung des Entfernens kann es zu leichten Reizungen oder Rötungen auf der Haut kommen. Dies ist normal und klingt innerhalb von 30 Minuten ab. Es verschwindet von selbst. Bitte pflegen Sie Ihre Haut.
7. Schwangeren Frauen, Kindern, Patienten mit Hautkrankheiten und Personen nach plastischer Gesichtsoption wird die Anwendung nicht empfohlen.

PRODUKTEINFÜHRUNG

- Der Mitesserentferner ist ein neuartiges Gerät zur Gesichtsreinigung, -pflege und -schönheit, das die Funktionen Porenreinigung, Ölentfernung, Mitesserentfernung usw. vereint.
- In Kombination mit der nicht-invasiven Technologie und der Vakuumabsorptionsfunktion des Produkts verwendet dieses Produkt eine hautfreundliche Spitze mit verschiedenen Spezifikationen. Es absorbiert Unreinheiten und Mitesser in den Poren, verbessert so die Epidermis der Haut und die Poren werden wieder glatt und geschlossen.
- Dieses Produkt kann mit einem Mobiltelefon und einem Computer verbunden werden, und der Zustand der Gesichtshaut kann über die Mobiltelefon-App oder Computersoftware klar und intuitiv verstanden werden.

PRODUKTDIAGRAMM

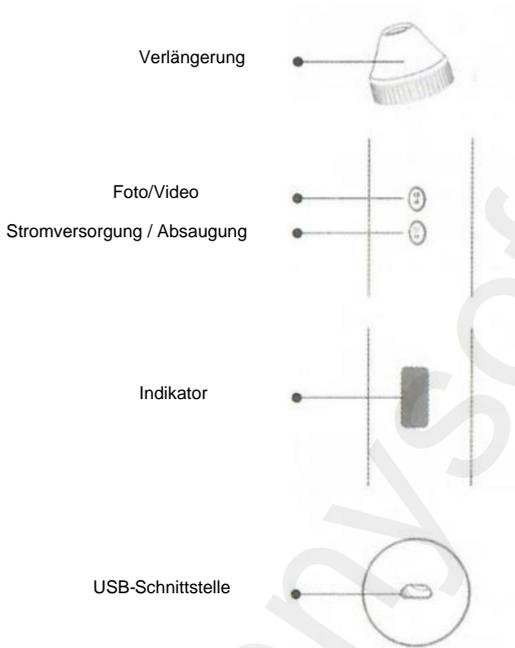


ANWEISUNGEN

Mobile Benutzer: Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App herunter.



2. Entfernen Sie das Produkt, wählen Sie den entsprechenden Aufsatz aus und installieren Sie ihn oben auf dem Produkt.

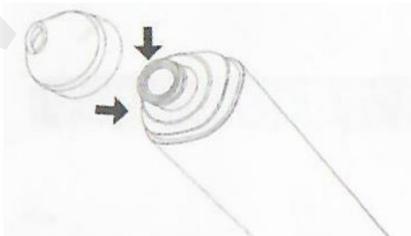

Geeignet für verschiedene Hauttypen



Kleiner runder Aufsatz
für sensible Bereiche



Kleiner ovaler Aufsatz
Zum Entfernen
schwarze Punkte in den Rillen
Nase



Großer ovaler Aufsatz
Großer Saugaufsatz,
geeignet für Mitesser
in der T-Zone



Mikrokristallin
Verlängerung
Geeignet für sanftes
Peeling und Entfernung
abgestorbener Haut



Mittlerund
Verlängerung
Geeignet für Gebiete mit
höherer Inzidenz
Mitesser/
Akne/fettige Haut




Großer runder Aufsatz
Geeignet für Mitesser
in der T-Zone

3. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt zu starten. Die Produkt-LED leuchtet auf. Öffnen Sie die App „Cleanski“ und klicken Sie, um eine Verbindung zum WLAN „Cleanski-XXXX“ herzustellen.



4. Kehren Sie nach der Verbindung mit dem WLAN zur App „Cleanski“ zurück, richten Sie die Linse auf Ihr Gesicht und vergewissern Sie sich, dass Sie den Status Ihrer Gesichtsporen auf Ihrem Telefon sehen können. Wenn die Abfrage „Cleanski-xxxx ist nicht online verfügbar, darf der WLAN-Assistent auf ein besseres Netzwerk wechseln?“ erscheint, klicken Sie auf „Nicht erlaubt“.
5. Im eingeschalteten Zustand können Sie die Ein-/Aus-/Abluftschaltertaste kurz drücken, um die Saugleistung des Produkts Ihren Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Das Produkt ist auf 3 stufenlose Geschwindigkeiten eingestellt (Sanftmodus, Standardmodus, Starkmodus).

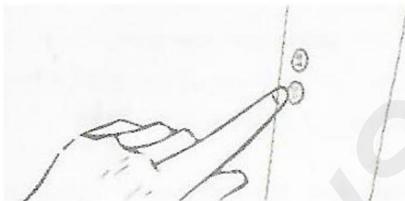

6. Bewegen Sie die Spitze langsam über die Haut und halten Sie sie nicht länger als 2 Sekunden auf einer Stelle.



7. Reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch und bewahren Sie es für die weitere Verwendung trocken und sauber auf.

LADEN

Wenn die Ladung niedrig ist, blinkt das rote Licht; Zum Laden müssen Sie ein Netzteil mit der angegebenen Spannung von 5V/1A verwenden.

Während der Akku geladen wird, leuchtet die Kontrollleuchte rot.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün (Ladevorgang dauert 2 Stunden).

PARAMETER

Name	Intelligenter visueller Mitesserentferner
Erweiterung	20x
Batterieparameter 800 mAh	
Ladezeit 2 Stunden	
Akkulaufzeit 1,5 Stunden	
Maße	197 x 40 x 40 mm
Systemunterstützung	Android 4.4, iOS 9.0, Windows Vista/7/8/10, MacOS X 10.8 und höher
Liste der Elemente	Intelligenter visueller Mitesserentferner 1x Verlängerung 6x USB-Datenkabel 1x Produkthandbuch 1x

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz